




# NPC-100 and NPC-120 Series

NovaSensor  
Disposable Medical  
Pressure Sensors

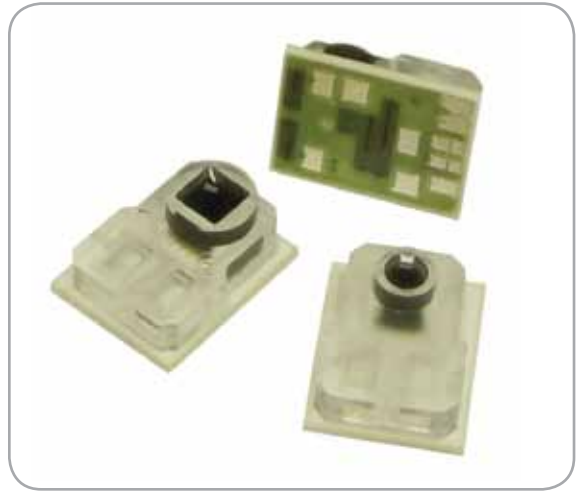

## Features

- Solid state, high reliability
- Media compatibility
- High performance
- Factory filled with dielectric gel
- Small size
- Fully tested
- Temperature compensated
- Low cost disposable design
- Designed to AAMI specifications

## Applications

- Medical instrumentation
- Blood pressure measurement
- Infusion pumps
- Kidney dialysis machines


**Amphenol**  
**Advanced Sensors**

# NPC-100 and NPC-120 Series Specifications


The NovaSensor NPC-100 and NPC-120 Series pressure sensor are specifically designed for use in disposable medical applications. The devices are compensated and calibrated per the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) guidelines for industry acceptability. The sensors integrate a high-performance, pressure sensor die with temperature compensation circuitry and gel protection in a small, low-cost package.

The NPC-100 and NPC-120 Series are manufactured in a class 1000 clean-room to minimize possible sources of contamination. A specially designed silicon micromachined sensing element is used to meet or exceed all industry requirements while minimizing assembly and test cost for maximum customer value. Thick-film laser-trimming is employed for final compensation and calibration. Sensitivity is maintained to  $\pm 1\%$  and linearity is better than 1% in the physiological operating pressure range.

The NPC-100 and NPC-120 Series are batch-manufactured in ceramic plate form and shipped as an intact array or in Tape and Reel for easy customer automation. This assembly method draws from well-established manufacturing techniques used in the electronics industry in order to produce a quality, high volume product.

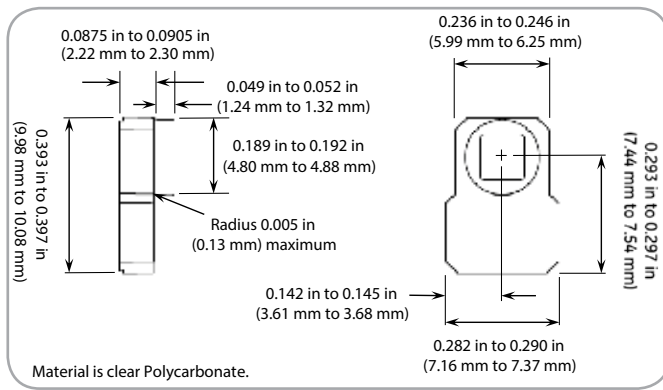

NPC-100 Series pressure sensor port interface

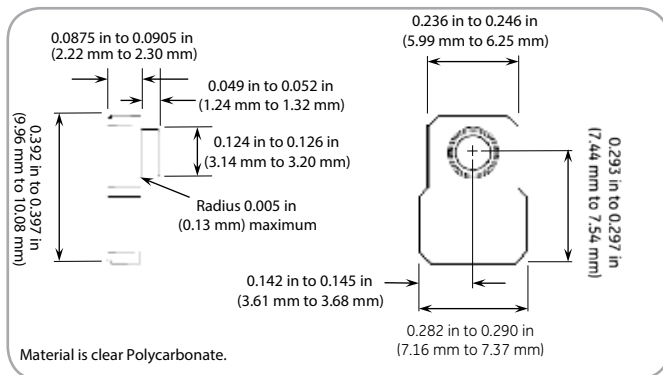

NPC-120 Series pressure sensor port interface

| Parameter                                               | Value         | Units | Notes                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| <b>General</b>                                          |               |       |                         |
| Pressure Ranges                                         | -30 to 300    | mmHg  | -0.58 psi to 5.8 psi    |
| Overpressure                                            | 125           | psi   | minimum                 |
| <b>Electrical @ 72°F (22°C) Unless Otherwise Stated</b> |               |       |                         |
| Input Excitation                                        | 1 to 10       | VDC   | Calibrated for 6 VDC    |
| Dielectric Breakdown                                    | 10,000        | VDC   | 5                       |
| Risk Current                                            | 2             | μA    | Maximum (per AAMI), 5   |
| Input Impedance                                         | 1800 to 3300  | Ω     |                         |
| Output Impedance                                        | 285 to 315    | Ω     |                         |
| <b>Environmental</b>                                    |               |       |                         |
| Temperature                                             |               |       |                         |
| Compensated                                             | 15°C to 40°C  | °C    | (59° to 104°F)          |
| Operating                                               | 15°C to 40°C  | °C    | (59° to 104°F)          |
| Storage                                                 | -25°C to 70°C | °C    | (-13° to 158°F)         |
| Humidity                                                | 10 to 90      | %     |                         |
| Light Sensitivity                                       | 1             | mmHg  | maximum (per AAMI BP22) |
| Operating Product Life                                  | 168           | hours |                         |
| Shelf Life                                              | 3             | years |                         |

|                             |                               |    |        |
|-----------------------------|-------------------------------|----|--------|
| <b>Mechanical</b>           |                               |    |        |
| Weight                      | <0.0044                       | lb | (<2 g) |
| Media Interface             | Medical grade, dielectric gel |    |        |
| Gel Tube Interface Material | Polycarbonate                 |    |        |

| Parameter                      | Units      | Minimum | Type | Maximum | Notes |
|--------------------------------|------------|---------|------|---------|-------|
| <b>Performance Parameters*</b> |            |         |      |         |       |
| Offset                         | mmHg       | -25     | 0    | 25      |       |
| Sensitivity                    | μV/V/mmHg  | 4.95    | 5    | 5.05    |       |
| Calibration                    | mmHg       | 97.5    | 100  | 102.5   | 2     |
| Symmetry                       | %          | —       | —    | ±5      |       |
| Linearity (-30 to 100 mmHg)    | mmHg       | —       | —    | 1       | 6     |
| Linearity (100 to 200 mmHg)    | % output   | —       | —    | 1       | 6     |
| Linearity (200 to 300 mmHg)    | % output   | —       | —    | 1.5     | 6     |
| Thermal Coefficient Offset     | mmHg/°C    | —       | —    | ±0.3    | 3     |
| Thermal Coefficient Span       | %/°C       | —       | —    | ±0.1    | 3     |
| Frequency Response             | Hz         | 1200    | —    | —       | 5     |
| Phase Shift                    | degrees    | —       | —    | 5       | 5     |
| Offset Drift                   | mmHg/8 hrs | —       | —    | 1       | 4,5   |

\* 1. All values measured at 6 VDC and 71.6°F (22°C) and after five second warm up unless otherwise specified.

2. Output of sensor with no pressure applied and a 150 kΩ resistor shorted across +IN to +OUT.


3. Over a temperature range of 59°F to 104°F (15°C to 40°C).

4. Normalized offset/bridge voltage—8 hours after 20 seconds. warm-up.

5. Previously qualified, not tested in production.



6. Deviation from straight line drawn through zero and 100 mmHg data points.

7. These sensors are compatible with ETO (ethylene oxide) sterilization. The user is responsible for establishing and validating suitable process conditions to prevent damage to the sensor.

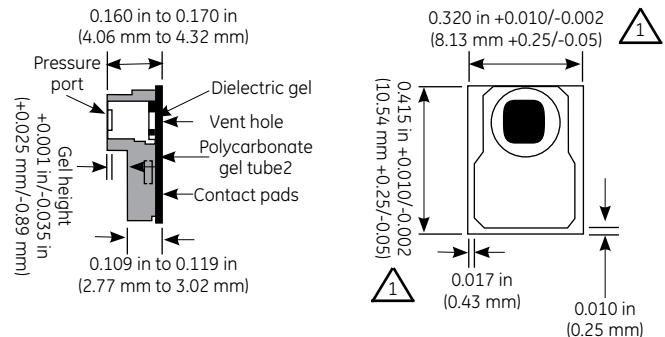

1. Tolerances reflect typical flaring during the singulation process.


NPC-100 Series package diagram

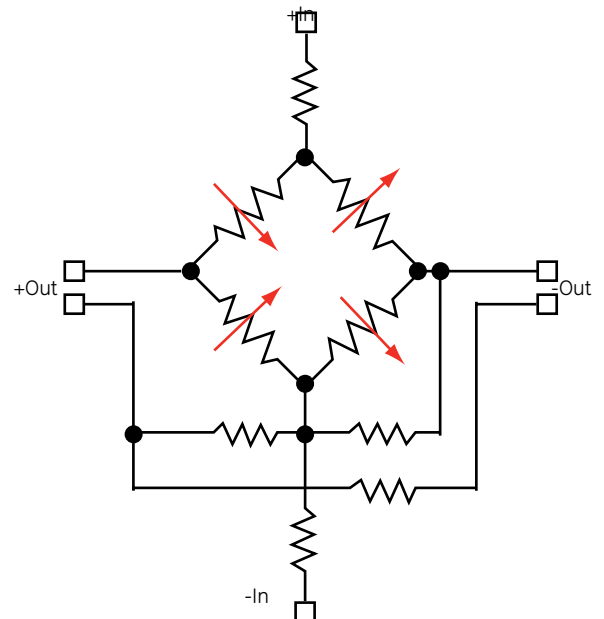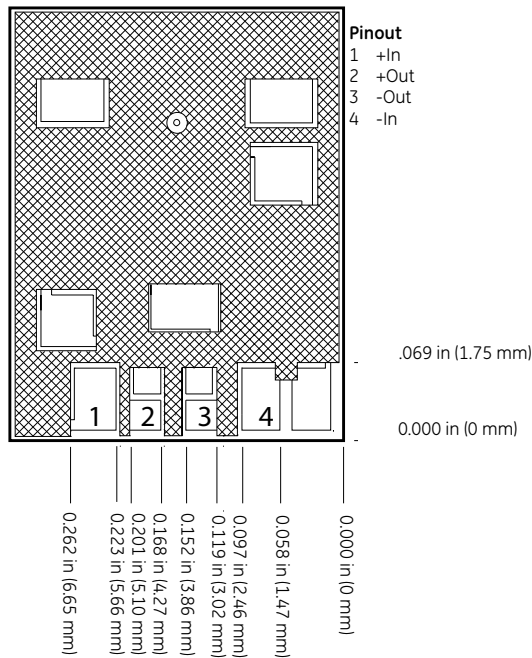

NPC-100 Series schematic diagram

1. Tolerance on electrical pad location is  $\pm 0.010$  in ( $\pm 0.25$  mm).
2. Contact pads are suitable for soldering.
3. Split pads on +Out and -Out must be connected for proper operation.
4. All dimensions assume a nominal 0.01 in (0.25 mm) distance between the edge of the solder pads to the edge of the ceramic. This distance will vary slightly from part to part.

NPC-100 Series electrical interface

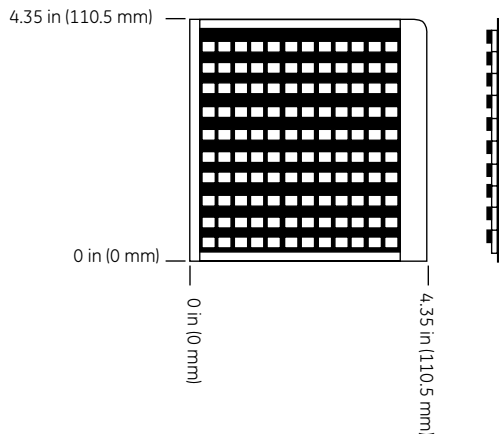

1. Sensors are shipped as 120 UP snapstrates that must be singulated by the customer.
2. Each reel or plate may include units that have failed visual or electrical parameters as well as good units. Bad units are identified with a dot on the backside of the cell location.
3. Reels and plates are shipped in dust free anti-static containers to prevent contamination of the gel surface.

NPC-100 Series shipping Configuration

## Ordering Information

The code number to be ordered may be specified as follows:

|           |      |                                  |  |
|-----------|------|----------------------------------|--|
| NPC-100   |      |                                  |  |
| NPC-120   | Code | Blank: Sold in 120-Up Snapstrate |  |
|           | T    | Tape and reel                    |  |
| NPC-1_0 - |      | Typical model number             |  |



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9